


KellyMed®
科力医疗

Jev&Kev®
雅凯医疗

KL-5051N
轮式营养泵

以人为本 精心制造

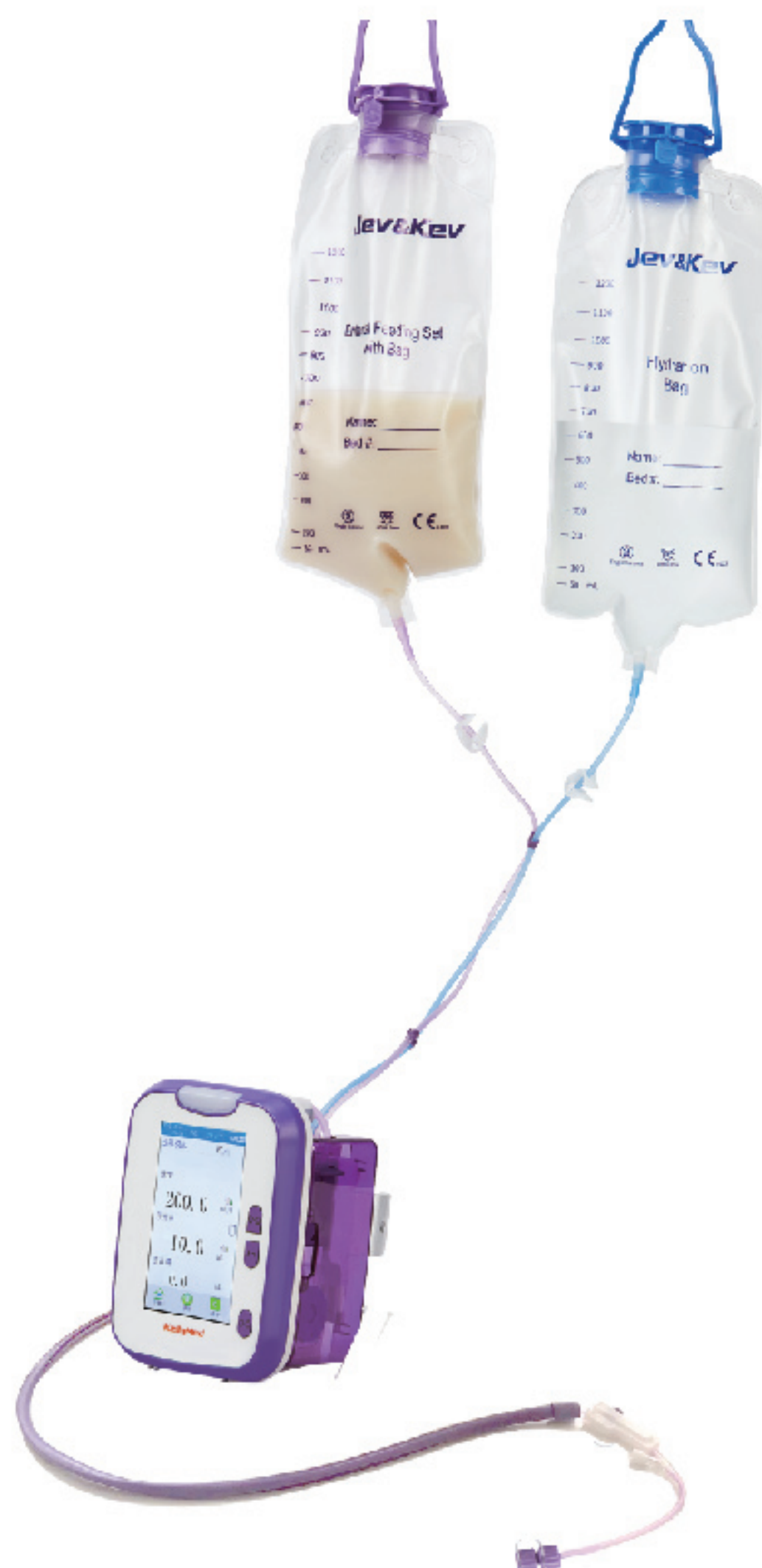

管家式服务 专业 高效

www.kelly-med.com

KL-5051N 轮式营养泵

ISO 13485



人性化设计:

- 便捷的人机交互功能，采用5寸电容触摸屏，人机交互更加人性化;
- 可以选配条状加热器，加热效果更好，满足临床肠内营养护理要求;
- 独有的语音提醒功能，对操作过程中的关键参数启动时语音提醒，让临床输液更安全;
- 独有的记忆配置功能，可以根据临床需要对上次输液参数进行记忆配置或清除，临床应用更加方便;
- 自动冲洗功能，配套专用的冲洗功能双管路，可以在输送肠内营养的过程中进行自动冲洗，避免管路堵塞。



功能优势:

- 专管专用，配套专用的营养管，可以保证临床输入更加精度;
- 实时精度更准确，采用步进电机技术，平均速度控制更加精准，实时精度比脉冲式产品也更加稳定，可有效提高临床的;
- 多种工作模式，具有连续模式、脉冲模式、间歇模式、时间模式、科学喂养模式、冲洗模式等6种模式，方便满足临床的不同使用场景。独有的科学喂养模式，更关注营养患者的治疗需求;
- 更宽的输液流速，最大输送流速2000mL/h可以满足临床更广泛的需求。



北京科力建元医疗科技有限公司 Beijing KellyMed Co.,Ltd.

商务地址: 北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R
生产地址: 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技
产业基地景盛南二街15号1号楼二层
邮编: 100025 传真: 86-10-65587908
电话: 86-10-65582151 65582521 65561137 65561631

客户服务中心: 86-10-56370693
24小时销售热线: 18201520819 13810326437
24小时售后服务: 13911104144 13810539931
Email: sales@kelly-med.com
网址: www.kelly-med.com