



中国制泵首创
SINCE 1994

Add: 北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R
Post: 100025
Tel: 86-10-65582151 65582521 65561137 65561631
Fax: 86-10-65587908
Email: sales@kelly-med.com www.kelly-med.com

客户服务中心: 86-10-56370693
24 小时销售热线: 13911105778 18201520819
24 小时售后服务: 13911104144 13911104454

中国科学院力学研究所
北京科力建元医疗科技有限公司
Beijing KellyMed Co., Ltd.

KellyMed
科力医疗

通过 ISO 9001:2008
ISO 13485:2003

CE 1639



床旁输注工作站
SMART BUTLER KM-i8




领跑安全输注30年



WORKSTATION OVERVIEW 工作站概述

科力床旁输注工作站是科力建元提供的一种智能化输注解决方案，是公司依托中国科学院力学研究所等科研院所和高校的强大研究队伍，通过现代电子科技、IT 信息技术和高端精密制造工艺，为医疗机构带来的简捷、高效、智能化的输注产品，产品可广泛应用于医院的手术室、ICU 及各种特护病房。

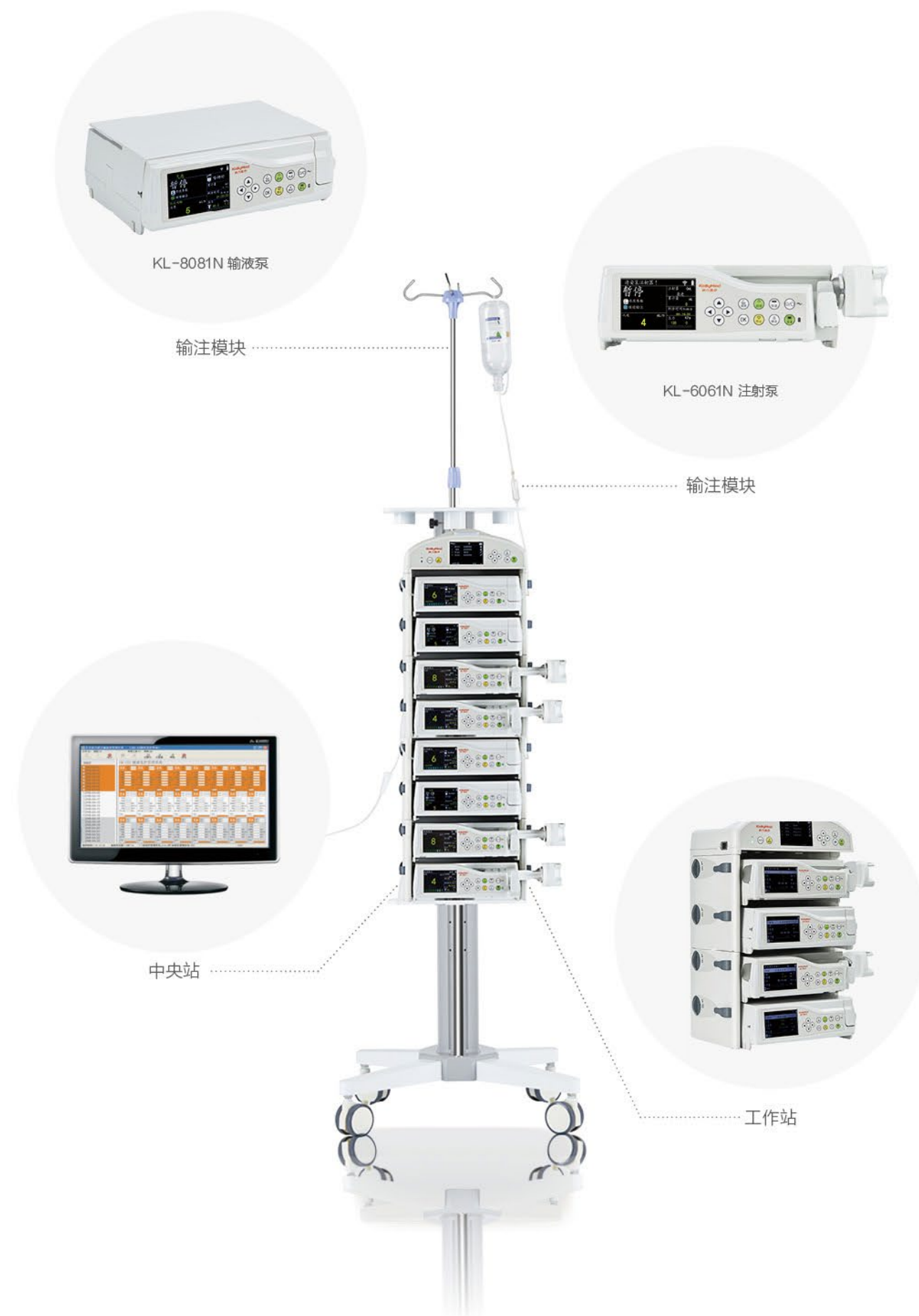

“科”刻品质，
“力”保健康。

KellyMed[®]
SMART BUTLER <<<

FLEXIBLE MANAGEMENT 灵活管理



集中管理
Centralized Management

一根电源、立体组装，自由叠放，节省空间。



*Innovative Infusion Systems
Since 1994*



两种触控 Two Kinds Of Touch

3.5 寸超大屏，指纹、物理双触控，用户体验更流畅。



灵活转运 Flexible Transport

可挂可提、方便转运，并且移动过程中通过 wifi 传输，保证中央站实时监控治疗情况。



运行流畅 Run Smoothly

支持热插拔，即插即用，不影响通道内其它单泵运行。



FLEXIBLE
MANAGEMENT


灵活 · 流畅

INTELLIGENT MANAGEMENT

智能管理

监控 + 报警 Monitoring & Alarm

KL-9021N 大屏集中监控通道内单泵运行，并且连接护士呼叫系统，根据床位号分别报警。

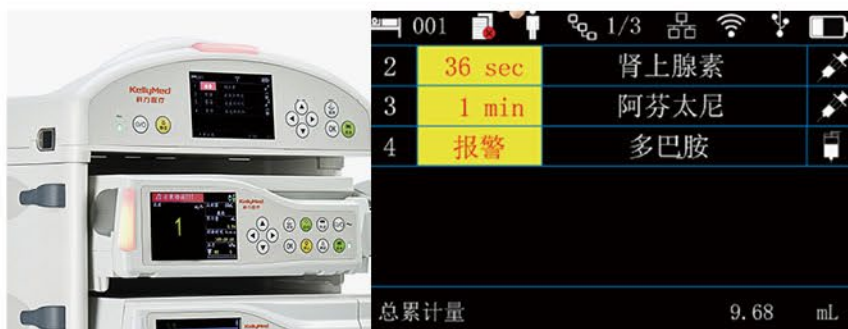

智能级联 Intelligent cascade

工作站有顺序级联、循环级联、任意级联三种模式，使输注实现无缝衔接，降低高危病人频繁换药带来的危险，保证输注安全。



顺序级联



循环级联




任意级联



支持 HL7 协议 + 多接口 Support HL7 Protocol & Multiple Interfaces

提供标准的 HL7 通信协议，可互联医院 HIS/CIS 系统和 KL-9012N 输注信息采集系统；预留丰富的外设接口，随时可连接扫码枪、滴数传感器。

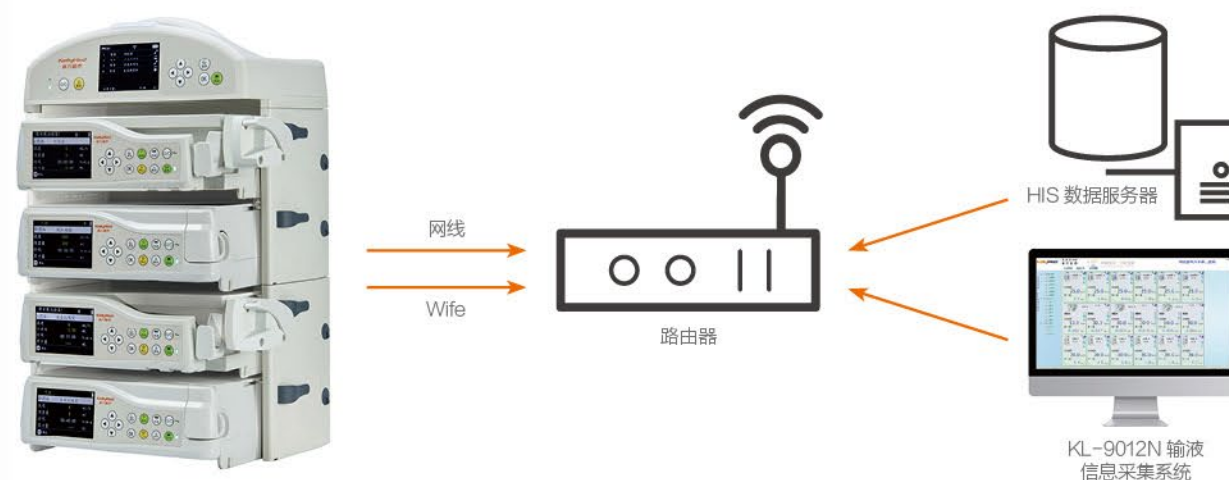



SAFETY MANAGEMENT 安全管理

药物库功能 Drug Library Function

预存多种常见药物信息，可自由选择、记录患者用药，并且药物剂量提示正确的范围值，如果药物剂量超限，工作站立即报警，保证输注过程的安全。




指纹认证 Fingerprint Authentication

工作站可设定 1-5 分钟内锁定，只有录入指纹的监护人员可轻松实现解锁，保护治疗过程的安全。



统一声光报警 Sound-Light Alarm

工作站顶部和单泵外侧均设计报警灯，通过双 CPU 进行安全检测，帮助监护人员更加快速的发现报警，保障运行安全。

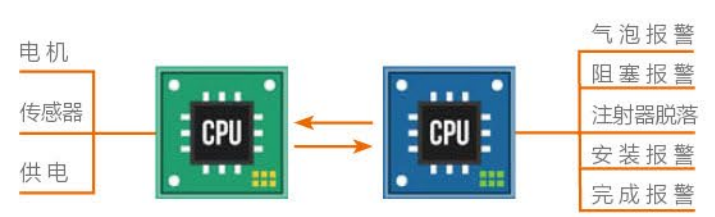

历史记录 Historical Record

工作站内置数据存储，自动存储历史记录 >=10000 条，数据存储时间在八年以上，通过 U 盘导出，便于病情回顾和分析。



超长续航时间 Long Battery Life

使用大容量锂电池，让运行续航时间长达 10 小时，为转运和紧急情况保驾护航，电量实时显示。

