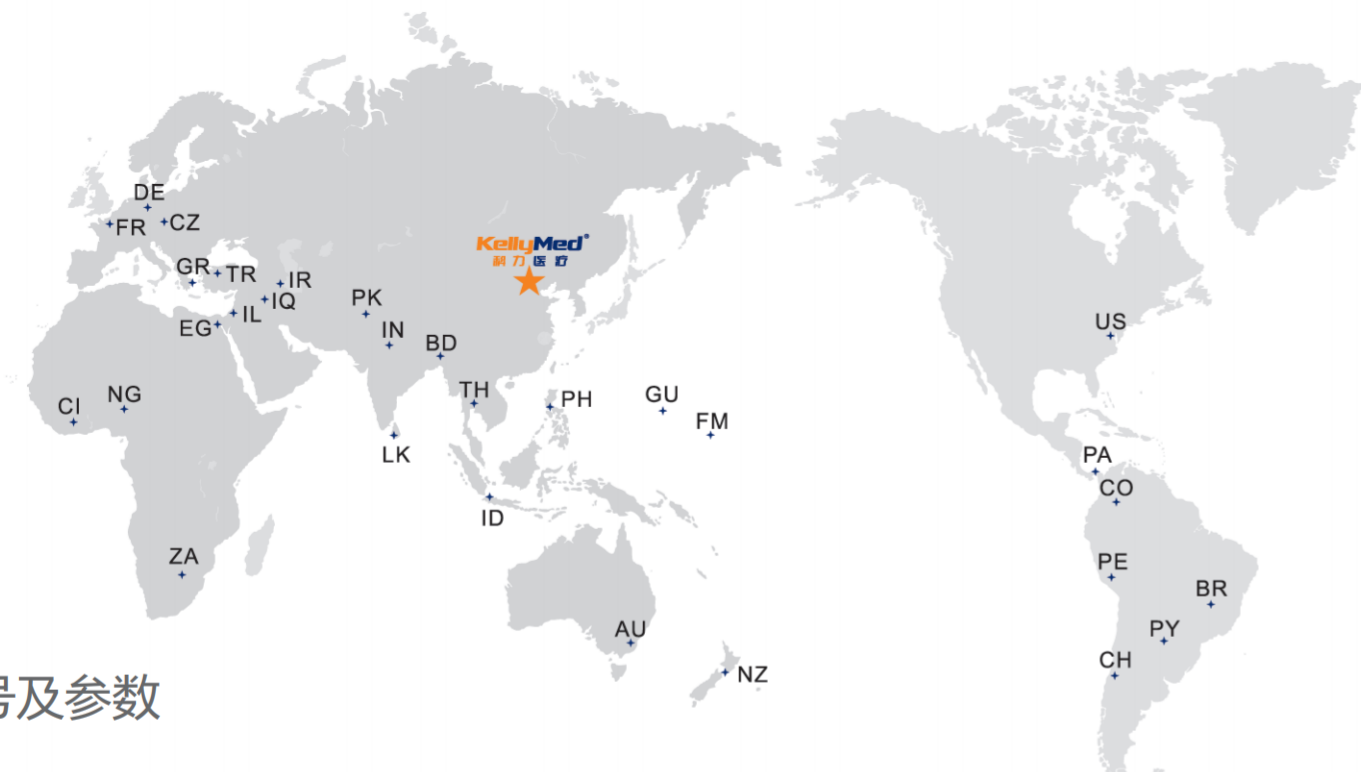




型号及参数

分类	产品型号	配 置
高弹型	JP3-02	穿刺器保护套、瓶塞穿刺器、带进气塞的进气器件、导管、滴管、滴斗、流量调节器、药液过滤器（过滤介质标称孔径：2um、3um、5um）、外圆锥锁定接头、接头保护帽、 注射座（Y型三通和注射件） 、 止液夹 。
	JP3-01	JP3-02基础 上减少止液夹。 （过滤介质标称孔径：2um、3um、5um）
	JP3-06	JP3-02基础 上减少注射座。 （过滤介质标称孔径：2um、3um、5um）
	JP3-05	JP3-02基础 上减少止液夹、注射座。 （过滤介质标称孔径：2um、3um、5um）

北京科力建元医疗科技有限公司
Beijing KellyMed Co.,Ltd.

商务地址：北京市朝阳区十里堡甲3号都会国际6R
生产地址：北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南二街15号1号楼
邮编：100025 传真：010-65587908
电话：86-10-65582151 65582521 65561137

江苏雅凯医疗科技有限公司
Jiangsu JevKev Medtec Co.,Ltd.

地址：江苏省泰州医药高新区药城大道1号G06幢东1/2层
电话：0523-86050096
网址：www.jevkev.com

客户服务中心：86-10-56370693
24小时销售热线：18201520819 13810326437
24小时售后服务：13911104144 13810539931
Email: sales@kelly-med.com
网址：www.kelly-med.com



传真：0523-86810056
邮编：225300



KellyMed® | Jev&Kev®
科力医疗 | 雅凯医疗
泵 用 耗 材 专 业 制 造 商

本企业通过ISO13485质量体系认证

泵用精密过滤输液器

用科技呵护健康

Our Technology Your Health



高效过滤 | 多功能呵护 | 可重力可泵用 | 精密过滤 | 不含DEHP

法规要求



重力输液器的国家标准、注册证、产品说明书、产品包装明确要求仅限重力使用的，不应该应用于压力输液。
国际上使用输液泵时都配套泵用输液器。

多重保障

- 高弹性保障：适配转速为300rpm蠕动泵，可在无间断连续运行500小时。
- 原材料保障：选用进口原料而成的高弹PVC，不含DEHP塑化剂。
- 工艺有保障：输液器管路内径、壁厚尺寸对精度影响较大，工厂严格控制工艺尺寸。
- 精密过滤保障：核孔滤膜技术，滤除直径小于5um微粒，提高输液满意度。
- 多用途保障：雅凯泵用输液器可重力输注，亦可泵用输注，不增加成本，规避风险。



安全保障

核孔滤膜技术、滤除有害微粒
与泵配合使用时，输液泵阻塞报警后能够提供可靠的风险评估数据，确保用药安全。

精准输注

管路内径、壁厚严格把关
保证高弹性、精度误差5%以内

不含塑化剂DEHP

非邻苯材质，保护患者和医护人员免受塑化剂危害。



高精度管径-----支持压力和重力输液